


Unidades dentales Planmeca

Equilibrio y alcance perfectos para instrumentos




Nuestros brazos equilibrados con flexión central ofrecen un recorrido corto de activación para los instrumentos, minimizando así la tensión en los hombros

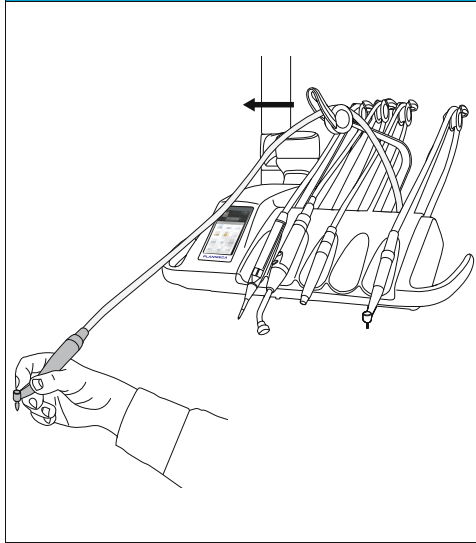

Los brazos de instrumentos con flexión central permanecen fuera del campo de visión del paciente




Cada operario puede ajustar con precisión el equilibrio en función de sus preferencias

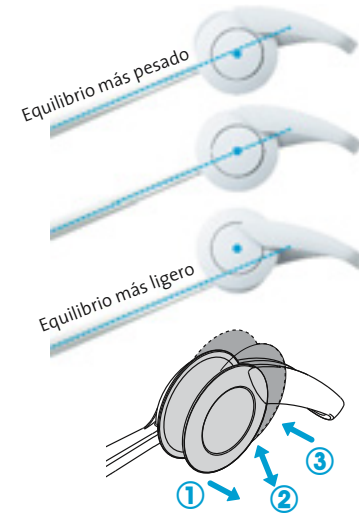

El montaje asimétrico de la manguera del instrumento y el brazo equilibrado impide que la manguera se atasque detrás del brazo




Los movimientos laterales garantizan un acceso perfecto a la cavidad oral

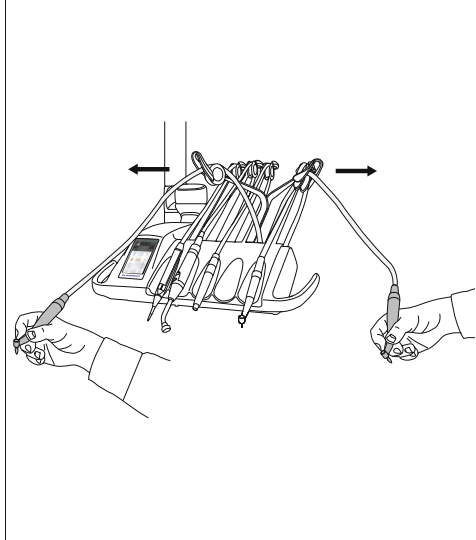


El equilibrio optimizado aligera el peso del instrumento, lo cual minimiza la tensión



Es posible soltar la manguera para tratamientos más largos, solo es necesario tirar un poco del brazo equilibrado para activar la manguera

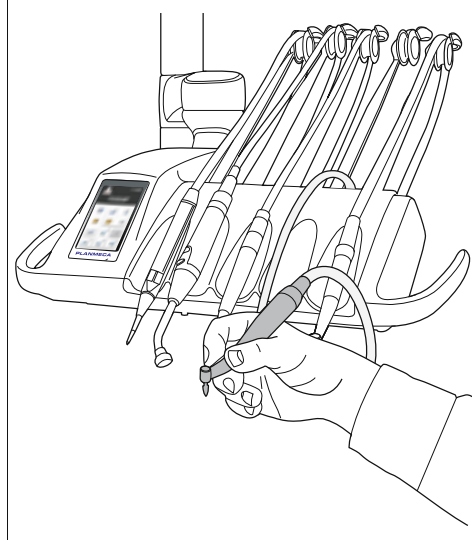

Los brazos de instrumentos desmontables permiten la limpieza y el cambio fácil de los brazos

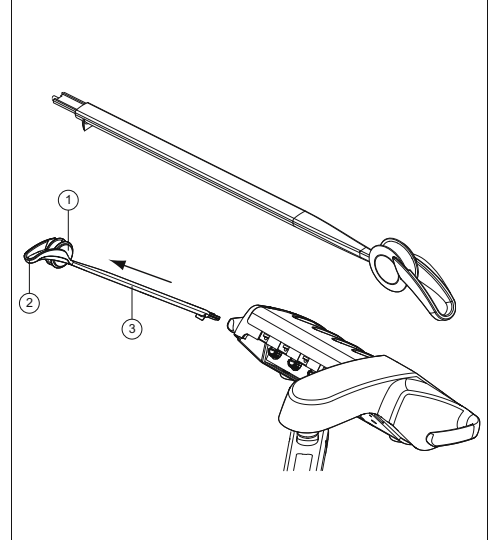

Distintas unidades – los mismos brazos equilibrados

La consola de instrumentos de todas las unidades dentales de Planmeca incorpora brazos de instrumentos equilibrados ergonómicos. La consola puede estar equipada con hasta cinco o seis instrumentos, en función del modelo de unidad. Excepto para la jeringa, las demás ranuras son intercambiables y pueden equiparse con cualquier instrumento de la amplia selección de Planmeca.

Todas las mangueras de instrumentos cuentan con conectores rápidos, lo que permite poner fácilmente en uso un nuevo instrumento. Cuando la manguera de un instrumento se conecta a la consola, la unidad selecciona automáticamente los servicios correctos y ofrece los ajustes por defecto correctos para ese instrumento específico. El brazo del equipo garantiza movimientos ligeros, precisos y bien equilibrados en todas las situaciones.



Planmeca Compact™ i Classic



Planmeca Compact™ i Touch



Planmeca Sovereign® Classic

PLANMECA

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | sales@planmeca.com | www.planmeca.es

Las imágenes pueden contener opciones no incluidas en la presentación básica.

Algunos de los productos mostrados podrían no estar disponibles en todos los países. Planmeca se reserva el derecho a realizar cambios.

Planmeca, All in one, Anomat Plus, Cobra, Comfy, DentoVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy y Ultra Relax son marcas comerciales registradas o no registradas de Planmeca en varios países.

